


# SILKY BEAUTY SKIN

## Инструкция по эксплуатации Ms.W Body

Благодарим Вас за покупку массажера миостимулятора для тела Ms.W Body.  
Перед началом использования внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

### Описание

Массажер миостимулятор для тела предназначен для косметических процедур в домашних условиях. Прибор идеально подходит для коррекции фигуры, особенно в области груди, живота, талии, бедер и ягодиц. В данном устройстве объединены две технологии: LED и EMS. LED свет стимулирует регенерацию коллагена, восстанавливает эластичность кожи, сокращает и разглаживает морщины, борется с воспалением и акне, нивелирует следы от них. Электрические импульсы EMS массажера проникают через эпидермальные клетки в слой дермы кожи, стимулируя мышцы, восстанавливая их эластичность и подтягивая контуры тела. Массаж ускоряет кровообращение.

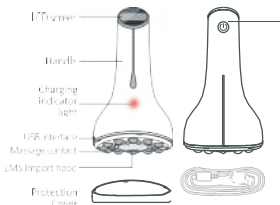


Наименование	Массажер миостимулятор для тела
Модель	EMS Body
Размеры	Диаметр 76 мм, высота 142 мм
Рабочее напряжение	3,3 В-4,2 В
Сила тока	1100 мА
Вес	163 гр
Дополнительно	Масло, инструкция, USB кабель, салфетка

### Функции

1. Зарядка от USB-кабеля требует 3,5 часа. Устройство может непрерывно работать до 3,5 часов после полной зарядки.
2. Вспышка красного света указывает на состояние недостаточной зарядки. Если индикатор непрерывно горит красным, это указывает на то, что массажер полностью заряжен. Если массажер длительное время не использовался, ему необходимо дать время около 15 минут, пока индикатор начнет мигать красным светом (режим зарядки).
3. Массажер имеет функцию нагрева, приблизительная температура составляет 55 °С. Разные люди чувствуют разницу в температуре, некоторые могут чувствовать жар. После того, как вы нанесете лосьон или масло / массажный крем на кожу, массажер автоматически подберет наиболее подходящую температуру.
4. Также можно использовать на других частях тела, таких как руки, грудь, талия, бедра, ноги и икры и т. д.
5. Напоминание: пожалуйста, сначала используйте средства для ухода за кожей, затем используйте массажер. Пожалуйста, обратите внимание, что чрезмерное использование средств по уходу за кожей труднее впитывается. Остатки средства по уходу за кожей могут проникнуть в устройство и повредить его.

### Способ применения

1. После душа насухо вытрите кожу.
2. Нанесите масло или лосьон на нужный участок тела.
3. Снимите защитную крышку, нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл в течение 2 секунд, чтобы устройство включилось, и выберите нужный режим.
4. Расположите массажную головку на нужном участке тела и прямыми или круговыми движениями медленно массируйте, пока средство для ухода за кожей не впитается.
5. В области груди аккуратно помассируйте прямыми движениями по направлению к соску (30-50 раз). Затем аккуратно помассируйте круговыми движениями разные части груди.
6. Повторяйте массажные движения, пока масло или лосьон не впитается в кожу. Возможны ощущения тепла в области массажа.
7. После использования нажмите удерживайте кнопку вкл/выкл в

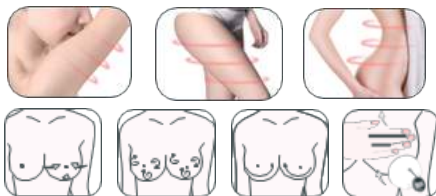

### Уход за массажером

1. Нажмите и удерживайте кнопку Вкл/Выкл в течение 2 секунд, чтобы выключить устройство.
2. Протрите изделие специальной тканью, не используйте никакие моющие средства. Чистящую салфетку, изготовленную из высококачественного флисового материала можно многократно стирать.
3. Поместите изделие в сухое и проветриваемое место, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей, и убедитесь, что вокруг нет агрессивных химикатов. Хранить вдали от детей.
4. Массажер не является водонепроницаемым! НЕ помещайте его в воду.

### Противопоказания к использованию массажера

Злокачественные образования, кожные, инфекционные и онкологические заболевания, беременность, сахарный диабет, нарушения работы щитовидной железы, повышенная светочувствительность, почечная недостаточность, тромбоз, мочекаменная болезнь, желчекаменная болезнь, гнойные воспалительные процессы, если вы недавно загорали, заболевания сердечно-сосудистой системы, гипертоническая болезнь, эпилепсия, наличие металлических штифтов и имплантатов в зоне обработки («золотые» нити, силикон, филеры, внутриматочная спираль и др.), нарушения целостности кожных покровов в месте обработки, ожоги, раны, острые инфекционные и вирусные заболевания, грипп, температура, детский возраст. Если вы чувствуете какой-либо дискомфорт, прекратите использование и обратитесь к врачу.

### Какой режим использовать и для чего

Массажер имеет 4 режима использования:

Режим	В результате использования	Технические хар-ки режимов
LED (красный свет) + вибрация	Омолаживающий эффект; Выравнивается тон кожи; Кожа становится подтянутой;	Частота: 150 Гц Ток: 260 мА Длина световой волны: 620-760 нанометров
LED (красный свет) + вибрация + нагрев до 55°C	Нормализуется водный баланс в дерме; Уменьшается проявление акне; Активно вырабатывается коллаген; При тепловом режиме косметические средства глубже проникают в кожу	Частота: 150 Гц Ток: 260 мА Длина световой волны: 620-760 нанометров
EMS слабый + LED (красный свет)	Повышается мышечный тонус и тургор кожи	Длина световой волны: 620-760 нанометров 10 Гц
EMS сильный + LED (красный свет) + нагрев до 55°C	При тепловом режиме косметические средства глубже проникают в кожу	Длина световой волны: 620-760 нанометров 30 Гц

SILKY BEAUTY SKIN

